

バリオス 970


# Varios 970

## iPiezo engine®

**ライト付** **ライト無し**  
マルチタスク 超音波システム

### 360° フットコントロール

どこからでも、どんな踏みかたでも、チップを振動させる事ができる360°全方向対応型フットコントロールです。横転しにくく、安全性と使いやすさを追求したフットコントロールは、その存在を感じさせません。

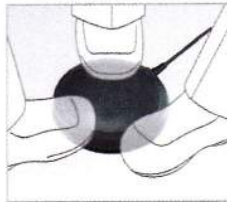

### 滅菌ケース

ハンドピース、チップ、チップ交換レンチを同時に洗浄・消毒・滅菌・保管まで行える滅菌ケースが付属しているので、いつも衛生的にご使用いただけます。



チップ着脱時



### 治療の幅を広げる付属チップ3種

使用頻度の高いスケーリングチップ2種と安全な抜歯をサポートする歯根膜剥離チップを標準付属。



### 消毒液への耐久性向上

ボトルからポンプ、そしてハンドピースまでの水回路に樹脂素材を使い、消毒液への耐久性を飛躍的に向上。消毒液残滓が原因の腐食や錆びによるトラブルを大幅に軽減します。



### 注水選択が可能

2本の注水ボトル以外に、長時間の治療などに有効な外部注水を選択する事ができます。ボトルから外部注水への切り替えは操作パネルで簡単に行う事ができます。



### らくらく移動「iCart-S」

らくらく移動可能なコンパクトなバリオスシリーズ専用カート「iCart-S」もご用意しました。(オプション)

iカート-S

## iCART-S

製品名 iCart-S 製品番号 Z298 標準価格 ¥50,000

- ・外形寸法：W360 × D420 × H800 mm
- ・質量：10 kg

■多目的に使えるZカートもございます。  
詳しくはP.37をご参照ください。



## バリオス 970 動物セット

**ライト付** バリオス 970 Lux 動物セット

製品名 VA970 Lux 動物セット 製品番号 Y1002614 標準価格 ¥286,000

**ライト無し** バリオス 970 動物セット

製品名 VA970 動物セット 製品番号 Y1002615 標準価格 ¥239,000

セット内容

- ・コントロールユニット
- ・ハンドピース
- ・ハンドピースコード
- ・フットコントロール (FC-70)
- ・スケーリング用チップ 2本 (G11、G13)
- ・歯根膜剥離用チップ 1本 (G90)
- ・水フィルターセット
- ・チップ交換レンチ (3個・CR-10)
- ・VAボトル (2本・400ml)
- ・滅菌ケース、他付属品



バリオス970 ライト付



熱水洗浄可能



135℃ 135℃までの温度でオートクレープ可能

チップ詳細  
P.54-55スペアパーツ  
P.68

バリオス 370 Lux / バリオス 370

# Varios 370

## iPiezo engine®

**ライト付** **ライト無し**  
 マルチタスク 超音波システム

高機能を閉じ込めたウルトラコンパクトボディー

### 特長 — バリオス370

- 取付け場所を選ばないウルトラコンパクトボディー
- 感覚的に使える操作パネル
- 操作がスムーズなパワー調節つまみと水量調節つまみ
- オートクレープ滅菌、熱水洗浄対応ハンドピース

### 治療の幅を広げる付属チップ3種

使用頻度の高いスケーリングチップ2種と安全な抜歯をサポートする歯根膜剥離チップを標準付属。



### 仕様

- 電源 : AC100 V 50/60 Hz
- 発振周波数 : 28~32 kHz
- 最大出力 : 11W (Gモード時)
- ユニット寸法 : W80 × D115 × H32 mm (つまみとコード除く)
- ユニット重量 : 430g (ハンドピース除く)



## バリオス 370 動物セット

**ライト付** バリオス 370 Lux 動物セット

製品名 VA370 Lux 動物セット 製品番号 Y1002617 標準価格 ¥200,000

**ライト無し** バリオス 370 動物セット

製品名 VA370 動物セット 製品番号 Y1002619 標準価格 ¥153,000

### セット内容

- コントロールユニット(ハンドピースコード付) ● バリオス370/370Lux ACアダプター ● ハンドピース
- コントロールユニットホルダー ● スケーリング用チップ 2本 (G11、G13)
- 歯根膜剥離用チップ 1本 (G90) ● ハンドピースホルダー ● フットコントロール (FC-70)
- 水フィルターセット ● チップ交換レンチ (CR-10)、他付属品

### オプション品



製品名 水道コネクター 製品番号 Z255021 標準価格 ¥5,000

- φ14~20mmの蛇口に適合



製品名 給水タンク 製品番号 Z255011 標準価格 ¥5,000

- 蓄圧式2.5L / 全長約36cm

■ バリオス370 / 370Lux 動物セットには水道コネクター、給水タンクは含まれておりませんので、別途ご注文ください。



熱水洗浄可能



135℃ 135℃までの温度で  
 オートクレープ可能



チップ詳細  
 P.54-55



スペアパーツ  
 P.68

バリオス

# Varios tip

## バリオス動物用チップラインナップ

### 歯根膜剥離

#### G90 スタンダード

標準付属



製品名 G90 製品番号 Z217700 標準価格 ¥13,000

使用最大パワー G 6

#### G90S ショート

オプション



製品名 G90S 製品番号 Z217701 標準価格 ¥13,000

使用最大パワー G 6

歯根膜剥離チップは、抜歯時の顎骨折や破折等のリスクを大幅に軽減。チップの形状を細く、且つエッジの両側面を鋭くすることで、術部へのアクセス性を高め、繊細な操作が求められる難抜歯においても安全な施術をサポートします。



**重度の歯槽骨吸収のある歯**  
薄くなった下顎骨の医原性骨折のリスクを軽減し安全に抜歯することが可能



**骨性癒着歯**  
歯槽骨の過剰な組織破壊を軽減でき、骨性癒着部位を平滑に剥離することが可能




**下顎犬歯残根歯**  
残根周囲歯槽骨を過剰に切削することなく歯槽骨形態の保持が可能

### 切削・形成用

#### G61D

オプション

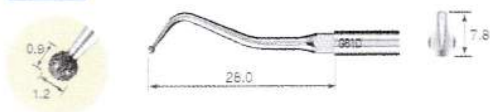


製品名 G61D 製品番号 Z217601 標準価格 ¥12,000

使用最大パワー G 2

#### G62D

オプション

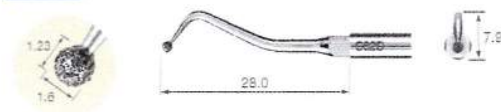

製品名 G62D 製品番号 Z217602 標準価格 ¥12,000

使用最大パワー G 2

ダイヤモンドコーティングされたチップは、抜歯後の骨棘平滑化及び不良肉芽の掻扱に最適。回転切削と比べ、低侵襲で骨切削でき、軟組織を損傷するリスクも軽減します。



ダイヤモンドチップ (G61DもしくはG62D) を装着し、十分な注水下で抜歯後の歯槽骨縁の骨棘を平滑化。



抜歯した全ての歯槽骨縁の骨棘をダイヤモンドチップで平滑にし、同時に不良肉芽の掻扱を実施。



歯槽骨縁の平滑後、吸収性縫合糸で歯肉同士を縫合して終了。

**G 6**：左記の記号と数値は、各チップにおける使用最大パワーモードと数値を示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

■必ず十分な注水下で行ってください。上記以外にもオプションとして各種チップを取り揃えております。



熱水洗浄可能

135℃  
135℃までの温度で  
オートクレープ可能

スケーリング

**G11** 先端が細くなっていますので、前歯などの比較的小さな部位、または小型犬や猫のスケーリングに適しています。

標準付属




製品名 G11 製品番号 Z217411 標準価格 ¥8,000  
使用最大パワー G 6

上顎前歯の例

**G13** 最も使用頻度の高い標準的なチップです。犬のスケーリング全般にお使いいただけます。

標準付属

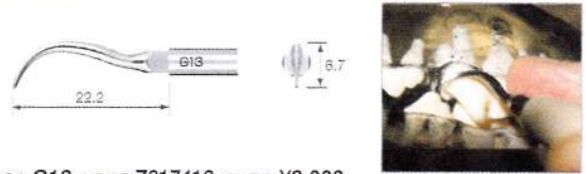

製品名 G13 製品番号 Z217413 標準価格 ¥8,000  
使用最大パワー G 6

上顎臼歯の例

**G2** 歯肉縁上に付着した大量の歯石除去に適したチップです。平らな断面を歯石にあて、歯面の形状にあわせて動かします。

オプション



製品名 G2 製品番号 Z217102 標準価格 ¥8,000  
使用最大パワー G 7

**G3** 先端が丸い形状になっていて、歯肉縁上に付着した大量の歯石除去に適したチップです。

オプション



製品名 G3 製品番号 Z217103 標準価格 ¥8,000  
使用最大パワー G 7

ペリオ

**P10** シャープエッジタイプのチップで、ポケット内へのアクセスがスムーズに行なえ、全般的に使用できます。硬い歯石の除去などに効果的なチップです。

オプション



製品名 P10 製品番号 Z217410 標準価格 ¥8,500  
使用最大パワー P 10



上顎前歯の例



上顎前歯の例

尿道結石用

**E50** 尿道結石用チップは、尿道内の結石を超音波振動で破砕する細くて挿入がスムーズなチップです。

オプション




製品名 E50 製品番号 Z217050 標準価格 ¥5,000

パワーレンジ P Min~Max  
E Min~Max

＜尿道結石用チップ使用に際しての注意＞

- 尿道結石用チップE50は、低い出力（モード設定キーPまたはE）からお使い下さい。高い出力だと粘膜を傷つける恐れがあります。

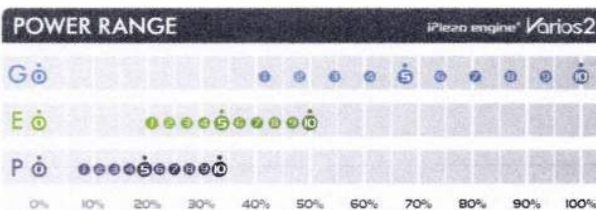

【チップの使用に際しての注意】

- 必ず添付文書および取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- チップのパワー設定は目的や症例に合わせて、各チップに適したモードとパワー数値をご使用ください。
- 各モードのパワーレベルについてはパワーモード比較表をご覧ください。
- 口腔内の状態や症例、歯石の沈着量を確認しながら、モード・パワーから使用し、状態に応じてモード・パワーを上げて行くことをお勧めいたします。
- チップは振動により発熱しますので、目的や症例によっては十分に注水してご使用ください。

※規定されたパワー以下で使用した場合でも、歯、肉によっては破砕することがあります。

■バリオス350 / 560 / 750 でご使用される場合、最大出力が異なります。それぞれの添付文書および取扱説明書でご確認ください。

熱水洗浄可能 135℃までの温度でオートクレーブ可能