

手術台スカラ 撮影台 タイプ

撮影台と手術台、2つの機能を兼ね備えた手術台です。手術中に動物を移動することなく、撮影をすることができます。



カセットレイのまわりは開放されているのでどこからでもコード類を通すことができます。

Features of Products

製品の特徴



スライド式カセットトレイ

カセットトレイが左右に移動できるため、動物を移動することなく撮影をすることができます。

[カセットのサイズ]
幅(最大):465mm
奥行:180~405mm
高さ(最大):23mm

(上記のカセットサイズと異なる場合はご相談ください)



ロープホルダー

通常の手術台としても使用できるように、スライド式のロープホルダーとロープが標準装備されています。

(4個セット)



フルオープン天板

天板が開くため、カセットトレイなどに溜まる毛や埃の掃除が楽に行えます。



スモーク天板

天板はスモーク(薄いグレー)が入ったアクリル製です。擦りキズや汚れが目立ちにくく、標準で透明なビニールシートが付属されています。



安心
2年保証



安心
2年保証

NTS
新チルトシステム



OX-1100N-GS
(チルト無)



OX-1100T-GS
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名 手術台スカラ撮影台タイプ ガススプリング チルト 無 / 有							
OX-1100N-GS	W1100×D580	850～1100・250	46.2	ガススプリング	—	70.0	4582605330653
OX-1100T-GS	W1100×D580	940～1190・250	55.0	ガススプリング	右 20、左 20	70.0	4582605330660

付属品: スライド式ロープホルダー×4、ロープ×4、透明ビニールシート



安心
2年保証



安心
2年保証



NTS
新チルトシステム



OX-1100N-TM
(チルト無)



OX-1100T-TM
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名 手術台スカラ撮影台タイプ 電動 チルト 無 / 有							
OX-1100N-TM	W1100×D580	550～950・400	51.0	電動 (A C100V最大170W)	—	70.0	4582605330677
OX-1100T-TM	W1100×D580	640～1040・400	60.0	電動 (A C100V最大170W)	右 20、左 20	70.0	4582605330684

付属品: スライド式ロープホルダー×4、ロープ×4、電源コード、フットスイッチ、透明ビニールシート

昇降台について

[手術台スカラVタイプ、Fタイプ、撮影台タイプ共通]



ガススプリング昇降

ペダルを踏むことで天板が上昇し、ペダルを離すと任意の位置で止まります。天板を下げるときはペダルを踏みながら、天板を上から押すと下がります。



ロングストローク電動昇降

フットペダルのUP/DOWNを踏むことで、天板が昇降します。ストロークが400mmもあり、音も静かでスムーズです。



OPTION 〈手術台〉

エクステンションチルト

UP1段、DOWN6段で角度の調整が可能。天板サイズを250mm延長します。

ジャックナイフポジション、ヘッドアップポジション、天板延長に




製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンションチルト	Fタイプ Vタイプ	W510×D250	10kg	4582605330691

エクステンショントレイ

器具置きやスケーラーの水受けに使用できます。トレイ、スノコは脱着式で溜まった水进行处理できます。(トレイの容量4L)

歯科処置等の水を使う作業

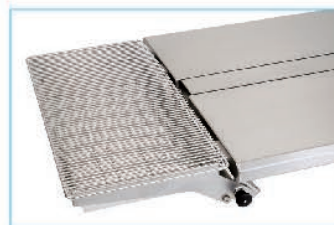

製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンショントレイ	Fタイプ Vタイプ	W510×D250	10kg	4582605330707

エクステンションボード

固定式で天板サイズが250mm延長します。

天板サイズの延長に



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンションボード	Fタイプ Vタイプ	W510×D250	10kg	4582605330714

ドレープアーチ

ドレープが動物の頭部にかからないようにできます。穴が開いているため、四肢や尻尾を補綴するためのロープを固定することも可能。

ドレープ下の空間確保や四肢固定に



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
ドレープアーチ	Fタイプ Vタイプ	W655×D543×H60	—	4582605330721

OPマット大

2重構造になっているため、マットヒーターを中に入れることができます。折り畳めるので保管がやすく、裏面には滑り止め加工がされています。

ポジションの安定に



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
OPマット大	Fタイプ Vタイプ	W1000×D500×H40	—	4582605330738

OPマット小

エクステンションシリーズ用のOPマットです。固定ベルト付

エクステンションシリーズ用



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
OPマット小	Fタイプ Vタイプ	W520×D260×H40	—	4582605330745

スカラ用チューブホルダー

チューブやコードをまとめることができ、自由に角度を変えることができます。

チューブやコードの整理に



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
スカラ用チューブホルダー	Fタイプ Vタイプ	W650×D115×H60	—	4582605330752

スカラ用ゴムシート

Fタイプ、Vタイプ用のゴムシートになります。裏面は抗菌仕様になります。(色:グレー)

天板の保護、滑り止めに



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
スカラ用ゴムシート	Fタイプ Vタイプ	W1000×D510	—	4582605330769

リフトアップキャスター

標準装備されているアジャスターから、キャスターに変更することができます。ロックをすることでリフトアップするので、安定感があります。



手術台の移動に便利

製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
リフトアップキャスター	全機種	W50×H60	70kg	4582605330486

スカラ用チルト

チルトが付いていない手術台に、チルトを付けることができます。



バージョンアップパーツ

製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
スカラ用チルト	チルト無タイプ	W400×D335×H90	70kg	4582605330776

グリットガイド

カセットのグリットを差し込むガイドです。



グリットがカセットの出し入れに影響されない

製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
グリットガイド	撮影台タイプ	—	—	4582605330783

折り畳み式延長テーブル

天板サイズが200mm延長され、5段階で角度(0~90°)を変えることができます。



ジャックナイフポジションや天板の延長に

製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
折り畳み延長テーブル	撮影台タイプ	W580×D200	10kg	4582605330790

独自の臨床スタイルを
実現させるための多彩な
オプションを完備



オプション
使用例



V型天板にOPマット大を敷いて
動物を固定

オプション
使用例



ドレープアーチは四肢を固定することにも
使用できます。

Combination

設置例

